



AwaMed[®]
Medizintechnik

AWA CLASSIC
AWA VERTICAL
AWA INTENSO
AWA MOST
AWA KIDS
AWA DE LUX
AWA SLIM

NOWOŚĆ

PANELE MEDYCZNE

AWA CLASSIC



AWA CLASSIC - MODEL 1




AWA CLASSIC - MODEL 3



AWA CLASSIC - MODEL 4



AWA CLASSIC - MODEL 6

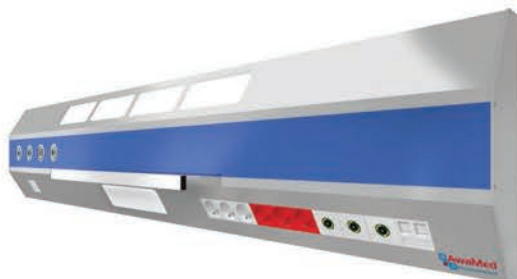


AWA CLASSIC - MODEL 8



AWA CLASSIC - MODEL 10

AWA CLASSIC

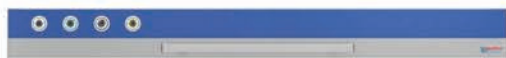

AWA CLASSIC - MODEL 11



AWA CLASSIC - MODEL 12



AWA CLASSIC - MODEL 13



AWA CLASSIC - MODEL 14




AWA CLASSIC - MODEL 15



AWA CLASSIC - MODEL 16


AWA CLASSIC

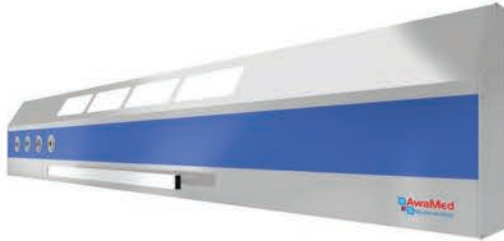

AWA CLASSIC - MODEL 17



AWA CLASSIC - MODEL 18

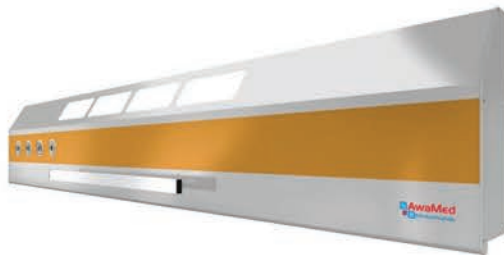


AWA CLASSIC - MODEL 19



AWA CLASSIC - MODEL 20



AWA CLASSIC - MODEL 23

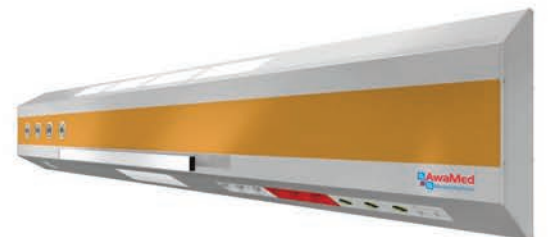

AWA CLASSIC - MODEL 24

AWA VERTICAL

AWA VERTICAL - MODEL 3



AWA VERTICAL - MODEL 4



AWA VERTICAL - MODEL 13



AWA VERTICAL - MODEL 7



AWA VERTICAL - MODEL 8



AWA VERTICAL - MODEL 9



AWA VERTICAL - MODEL 14



AWA VERTICAL - MODEL 24



AWA VERTICAL - MODEL 25



AWA INTENSO



AWA INTENSO - MODEL 5



AWA INTENSO - MODEL 9



AWA INTENSO - MODEL 21

AWA KIDS



AWA DE LUX



AWA MOST



NOWOŚĆ



AWA MOST - MODEL 6



AWA MOST - MODEL 9

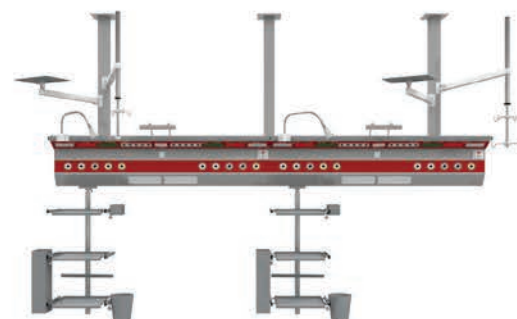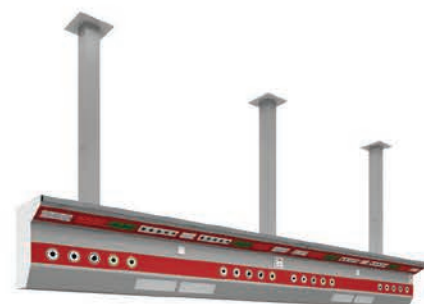

AWA MOST - MODEL 23

NOWOŚĆ

AWA SLIM

49 mm
NAJCIEŃSZY
PANEL
W POLSCE



SPECYFIKACJA PANELI I MOSTÓW

SPECYFIKACJA:

- panel jedno stanowiskowy;
- profil wykonany z aluminium;
- możliwość malowania proszkowego w kolorze z palety RAL lub uzyskania koloru w wyniku anodowania;
- montaż ścienny (panele: Classic, Vertical, Intenso, Kids, De Luxe) lub sufitowy (Mosty) przy pomocy dedykowanych zawiesz sufitowych;
- możliwość montażu szyny medycznej na części lub całej długości panelu;
- w przypadku paneli Vertical i De Luxe możliwość montażu rury Rexroth na całej długości panelu;
- możliwość montażu do szyn i rury Rexroth półek, w tym półek obrotowych;
- możliwość montażu w mostach wózków obrotowo - przesuwnych z półkami i szufladami;
- dostęp do gniazd elektrycznych, serwis lub wymiana od czoła ściennej jednostki medycznej bez konieczności demontażu panelu ze ściany;
- możliwość rozbudowy panelu o dodatkowe gniazda elektryczne bez potrzeby demontażu;

WYPOSAŻENIE:

GNIAZDA GAZÓW MEDYCZNYCH:

- wykonane w standardzie DIN lub AGA;
- zamontowane po stronie monitoringu i wentylacji;
- rodzaj punktów poboru gazów: tlen, próżnia, sprężone powietrze, podtlenek azotu (do 15 punktów na stanowisko zgodnie z życzeniem Klienta);
- możliwość zamontowania manometra kontrolnego ciśnienia gazu;

GNIAZDA ELEKTRYCZNE:

- zlicowane z powierzchnią obudowy;
- wykonane w module francuskim 45x45 mm;
- ilość gniazd elektrycznych zgodna z życzeniem Klienta;
- ilość gniazd ekwipotencjalnych zgodna z życzeniem Klienta;

SYSTEM PRZYŻYWOWY:

- przygotowanie otworu dla gniazda systemu przyżywowego;

GNIAZDA TELEKOMUNIKACYJNE:

- gniazdo komputerowe RJ45, RJ11;

OŚWIETLENIE SALI:

- oświetlenie ogólne np. T5, 2G11 o mocy pojedynczej świetlówki od 18W do 80W lub LED o mocy od 3W do 100W, załączane wyłącznikiem na panelu;

OŚWIETLENIE PACJENTA:

- oświetlenie ogólne np. T5, 2G11 o mocy pojedynczej świetlówki od 18W do 80W lub LED o mocy 100W, załączane wyłącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyżywowego [opcja];

OŚWIETLENIE MIEJSCOWE:

- oświetlenie od 2W do 5W załączane wyłącznikiem na panelu lub manipulatorem systemu przyżywowego [opcja];

GWARANCJA PRODUCENTA 24 miesiące

UWAGA!

Wszystkie pokazane modele paneli są modelami uniwersalnymi jedno stanowiskowymi. Poszczególne elementy jak punkty poboru, rodzaje gniazd elektrycznych, długość panelu itp. są zawsze indywidualnie dobierane przez Zamawiającego.



instalacja



gwarancja



atestacja



doradztwo



servis



projektowanie



analiza potrzeb

